

rombica

## Массажер для шеи

Wellness Electra


ID: MSG-001

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии Wellness. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Рабочие панели
2. Кнопка включения
3. Кнопка «+»
4. Кнопка «-»
5. LED-индикатор
6. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора

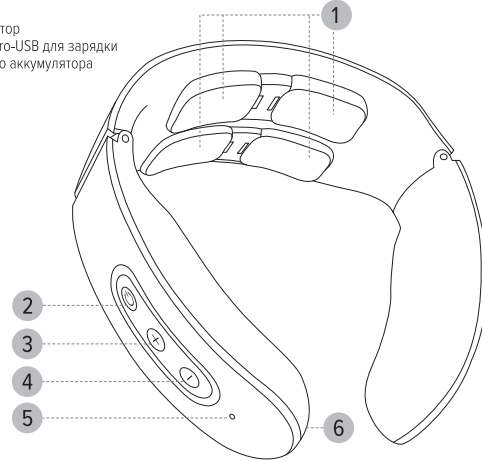

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

### УСТРОЙСТВО

Мощность устройства: 3 Вт  
 Питание: от встроенного аккумулятора  
 Вход: micro-USB 5В /1А  
 Емкость встроенного аккумулятора: 700 мАч / 3.7 В  
 Комплектация: массажер, USB-кабель, документация

**ВНИМАНИЕ:** не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите рабочие панели и место контакта на коже влажным полотенцем.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку включения. Звуковой сигнал и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Устройство автоматически выключится спустя 15 минут после включения.

#### УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Устройство обладает шестью различными режимами работы. После включения устройство находится в первом режиме работы. Для последовательного переключения режимов работы коротко нажимайте на кнопку включения. Звуковой сигнал подтвердит переключение режима работы.

#### УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ

Устройство обладает девятью различными уровнями интенсивности работы. Для увеличения интенсивности коротко нажимайте на кнопку «+», для уменьшения интенсивности коротко нажимайте на кнопку «-». Звуковой сигнал подтвердит переключение уровня интенсивности.

#### ФУНКЦИЯ НАГРЕВА

Устройство обладает функцией нагрева. При включении данной функции рабочие панели будут нагреваться. Для включения данной функции нажмите и держите кнопку «+». Для выключения данной функции повторно нажмите и держите кнопку «-». Во избежание низкотемпературных ожогов, не рекомендуется использовать данную функцию более 15 минут в день.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умшленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru  
 Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 5 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB-кабель к micro-USB разъему устройства. Затем подсоедините USB-кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор будет мигать красным цветом. Когда LED-индикатор погаснет – зарядка окончена.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите рабочие панели и место контакта на коже влажным полотенцем.
3. Устройство разработано для массажа шейного отдела. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного лица.
5. Если вы перенесли инсульт, или страдаете от гипертонии / гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
6. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт при использовании устройства – немедленно прекратите использование.
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
  - Отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
  - Вы перенесли операцию на шее;
  - У Вас плохое физическое состояние;
  - У Вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь.
9. Не рекомендуется использовать устройство беременным, кормящим женщинам, детям, людям преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
10. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
11. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.

12. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
13. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
14. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
17. Обязательно выключайте устройство после использования.
18. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
19. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
20. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
21. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
22. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
23. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не обливайтесь устройством, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: массажер для шеи. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа шейного отдела посредством электрических импульсов и нагрева.  
 Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.  
 Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.  
 Товарный знак / торговая марка: rombica.  
 Адрес производства: "Веньчжоу Хуифан Электрик Эпплайенс Ко. Лтд." Но. 192, Сюаочнь Роад, Ванцюань Таун, Пиньян Дистрикт, Веньчжоу Сити, Чжэцзян Провинс, КНР (Китайская Народная республика), Китай.  
 Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.  
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
 Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500.  
 Произведено: Китай. info@rombica.ru  
 Техническая поддержка – support@rombica.ru  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.  
 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие \_\_\_\_\_  
 Модель \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.